

## Richard Wolf Rektoskopi

Rektoskopi for voksen og barn

### Kostnadseffektiv løsning med flergangs håndtak og engangstuber

Richard Wolfs prokto-rektoskophåndtak er optimale for undersøkelse av rektum og kolon, for eksempel for å se etter polypper, hemorroider og svulster. Systemet består av et hardført flergangs prokto-rektoskophåndtak som brukes sammen med engangs rektoskopituber. Håndtaket har tilkobling for lyskabel for belysning under undersøkelsen. Rektoskopet brukes sammen med en autoklaverbar dobbeltballong.

### Sterile rektoskopituber trenger ikke å desinfiseres

Rektoskoptubene som brukes sammen med rektoskopet er pakket sterilt, og man trenger derfor ikke å desinfisere dem før bruk. Tubene er pakket enkeltvis og er klare til bruk rett ut av pakken. Rektoskopitubene er lyse for optimal sikt under undersøkelsen. De har diameter på 21 mm og finnes i lengder på 120 mm og 255 mm.

### Eget barnerektoskop

Richard Wolf produserer også et flergangs rektoskop for barn. Alle deler av dette er flergangs, og håndtaket har tilkobling for lysledning. Tuben har en diameter på kun 12 mm, og lengde på 200 mm. Systemet består av tube, obturator, håndtak, lukkekappe, dobbeltballong og tupfer-tang. Man kan i tillegg kjøpe tilhørende biopsitang.

### Tilbehør


Blant tilbehøret som finnes for Richard Wolfs prokto-rektoskopisystemer har man tuber for sug, koagulasjons-elektroder, fremmedlegemetenger, biopsitenger, tupfer-tenger, pumpesystemer, med mer. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spesielle behov!



Prokto-rektoskop med rektoskopitube



Prokto-rektoskophåndtak og dobbeltballong

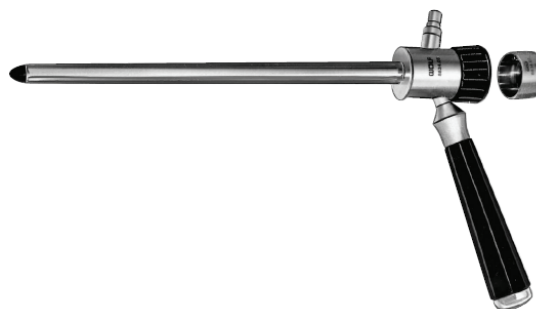

Barnerektoskop

Bestillingsinformasjon	Artikkelnr.	Antall
Rektoskopihåndtak	883890	1 stk
Lukkekappe til håndtak	883860	1 stk
Dobbeltballong	12700	1 stk
Rektoskopitube, Ø 21 mm, 255 mm, engangs, steril	4844255	Eske á 10 stk
Rektoskopitube, Ø 21 mm, 120 mm, engangs, steril	4844120	Eske á 10 stk
Barnerektoskop m/tube obturator, håndtak, lukkekappe, dobbeltballong og tupfertang	883426	1 stk
Biopsitang til barnerektoskop	864560	1 stk

